

LÍNEA DE CONSUMIBLES
VALIDACIÓN DE MUESTRAS & FICHA TÉCNICA

CONTACTO:

FRANK CORREA

fcorrea@mditraders.com

993 339 602

MDI TRADERS SAC



INDICADORES DE LIMPIEZA

I. Indicadores de Limpieza para Prueba de Lavado

Indicador de Limpieza WTL 198 0061 NIVEL DE DESAFÍO ALTO


DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores de Limpieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0061 Nivel de Desafío Alto
PROCESO DE LAVADO	Limpieza y Termodesinfección
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	200 Unidades en Bolsa de Aluminio
COLOR INICIAL	Azul
COLOR FINAL	Eliminación de la Sustancia Orgánica Azul
TAMAÑO	70 mm x 30 mm (Aproximadamente)
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016. ISO/TS 15883-5:2005
METALES PESADOS	No Aplica
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Edgardo Rebagliati Martins
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0250



I. Indicadores de Limpieza para Prueba de Lavado

Indicador de Limpieza
WTL 198 0062 NIVEL DE DESAFÍO MUY ALTO






DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores de Limpieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0062 Nivel de Desafío Muy Alto
PROCESO DE LAVADO	Limpieza y Termodesinfección
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	200 Unidades en Bolsa de Aluminio
COLOR INICIAL	Fucsia
COLOR FINAL	Eliminación de la Sustancia Orgánica Fucsia
TAMAÑO	70 mm x 30 mm (Aproximadamente)
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016. ISO/TS 15883-5:2005
METALES PESADOS	No Aplica
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Clínica Good Hope
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0250

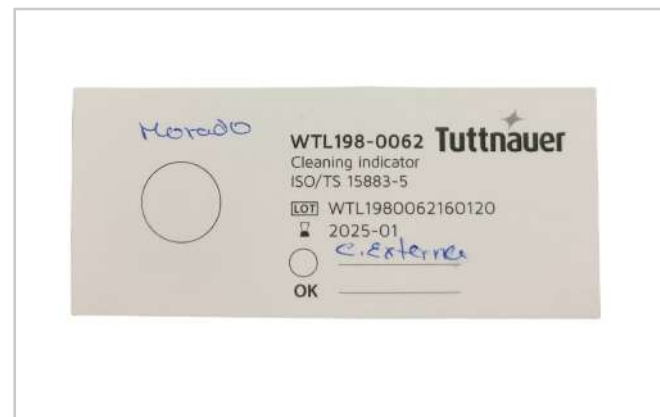

A decorative L-shaped line consisting of a vertical line on the left, a horizontal line at the top, and a horizontal line at the bottom, all in a light gray color.

INDICADORES QUÍMICOS

Guía de Referencia de Resultado:

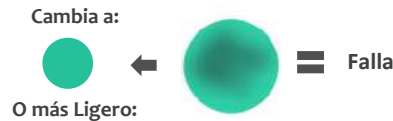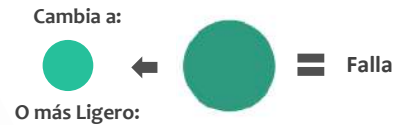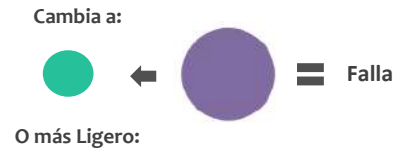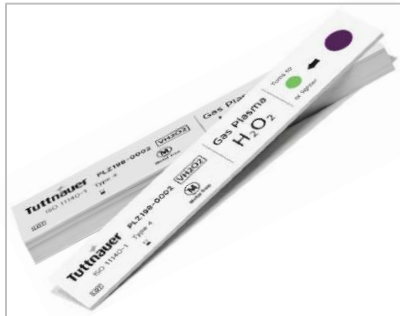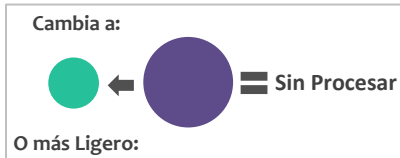


Falla:

No se alcanzaron uno o más parámetros de esterilización. Los materiales no pueden considerarse estériles y deben procesarse nuevamente.

Las principales causales de falla son:

1. Duración inadecuada del ciclo.
2. Selección de ciclo inadecuada.
3. Sobrecarga / Carga incorrecta del esterilizador.
4. Concentración Inadecuada del agente de esterilización.
5. Mal funcionamiento del esterilizador.
6. Indicador de bloqueo con gran masa metálica.

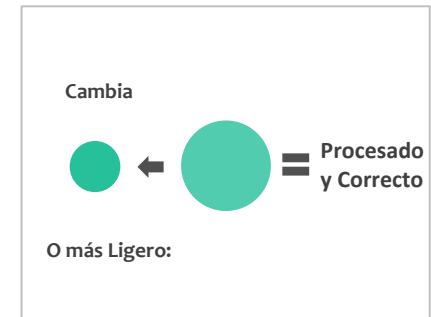


II. Indicadores Químicos

Indicador Multi-variable para Proceso de Esterilización por Vapor

Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno | Tipo 4 | PZL198-0002

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	PLZ198-0002 Tipo 4
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Plasma o Peróxido de Hidrógeno
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	250 Unidades en Bolsa de Aluminio
COLOR INICIAL	Púrpura
COLOR FINAL	Verde
TAMAÑO	105 mm x 18 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0137

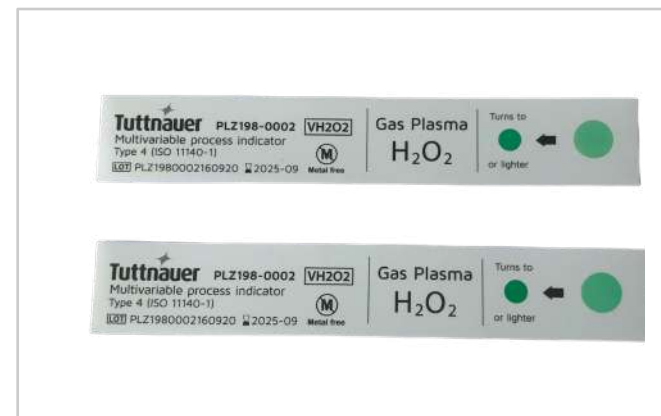

Guía de Referencia de Resultado:



Cambia a:



Falla



Falla



Falla

Verde

Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Las principales causales de falla son:

1. Duración inadecuada del ciclo.
2. Selección de ciclo Incorrecta.
3. Sobrecarga / Carga incorrecta de el esterilizador.
4. Mala calidad del vapor.
5. Mal funcionamiento del esterilizador.
6. Indicador de bloqueo con gran masa metálica

Cambia a:



Procesado y Correcto


Verde

II. Indicadores Químicos


Indicador para Proceso de Esterilización por Plasma

Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno | Tipo 1 | PZL198-0003

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	PZL198-0003 Tipo 1
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Plasma o Peróxido de Hidrógeno
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	1 Rollo por Bolsa
COLOR INICIAL	Púrpura
COLOR FINAL	Verde
TAMAÑO	20 mm x 50 m
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Carlos Alcántara Butterfield
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0267

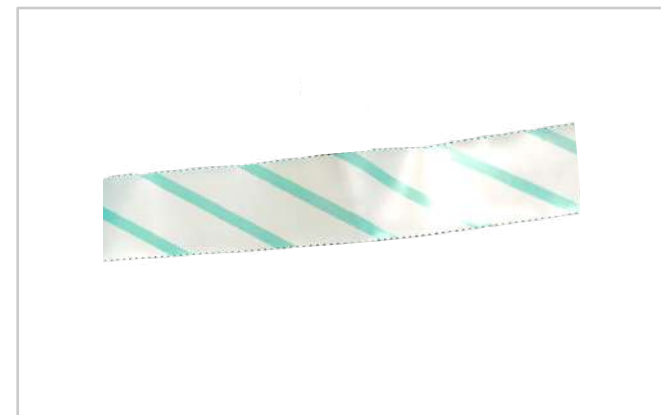

Guía de Referencia de Resultado:

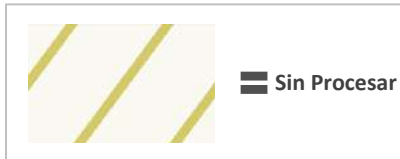

Cambia a:



Marrón Oscuro
ó Negro

Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Las principales causas de avería son:

1. Duración inadecuada del ciclo.
2. Selección de ciclo Incorrecta.
3. Sobrecarga / Carga incorrecta de el esterilizador.
4. Mala calidad del vapor.
5. Mal funcionamiento del esterilizador.
6. Indicador de bloqueo con gran masa metálica.

Cambia a:



≡ Procesado
y Correcto

Marrón Oscuro
ó Negro

II. Indicadores Químicos




Indicador para Proceso de Esterilización por Vapor

Vapor | Tipo 1 | WTL198-0053

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0053 Tipo 1
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	1 Rollo por Bolsa
COLOR INICIAL	Amarillo
COLOR FINAL	Marrón oscuro / Negro
TAMAÑO	19 mm x 50 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Sergio E. Bernales
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0164



Guía de Referencia de Resultado:

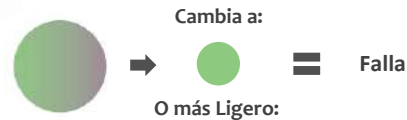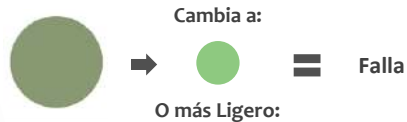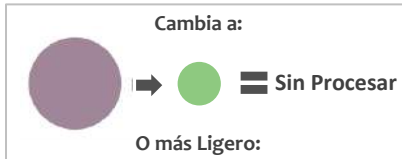


Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Las principales causales de falla son:

1. Duración inadecuada del ciclo.
2. Selección de ciclo Incorrecta.
3. Sobrecarga / Carga incorrecta de el esterilizador.
4. Mala calidad del vapor.
5. Mal funcionamiento del esterilizador.
6. Indicador de bloqueo con gran masa metálica

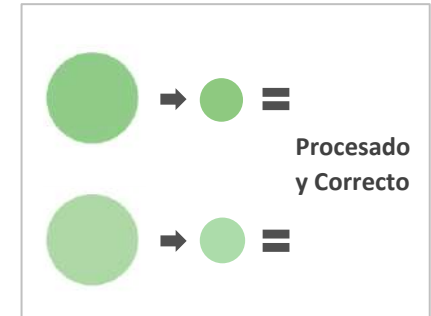

II. Indicadores Químicos





Indicador Multi-variable para Proceso de Esterilización por Vapor

Vapor | Tipo 4 | WTL198-0055

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0055 Tipo 4
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	500 Unidades en Bolsa de Aluminio
COLOR INICIAL	Púrpura
COLOR FINAL	Verde
TAMAÑO	105 mm x 18 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0125



Guía de Referencia de Resultado:

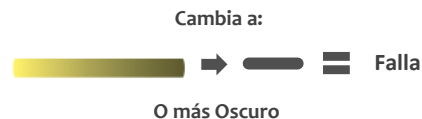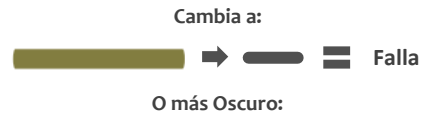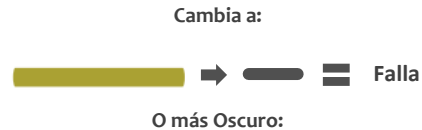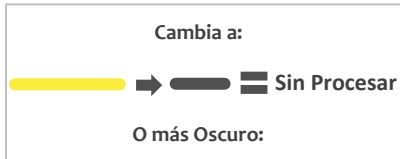


Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Las principales causas de avería son:


1. Duración inadecuada del ciclo.
2. Selección de ciclo Incorrecta.
3. Sobrecarga / Carga incorrecta de el esterilizador.
4. Mala calidad del vapor.
5. Mal funcionamiento del esterilizador.
6. Indicador de bloqueo con gran masa metálica.

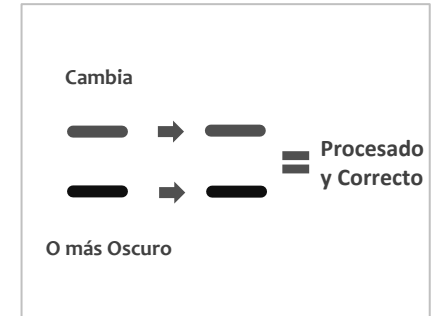





II. Indicadores Químicos

Validación de Producto en Calidad de Muestra

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0081 Tipo 4
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	250 Tiras dobles por Bolsa de Aluminio
COLOR INICIAL	Amarillo
COLOR FINAL	Negro
TAMAÑO	200 mm x 15 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Dos de Mayo
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0114

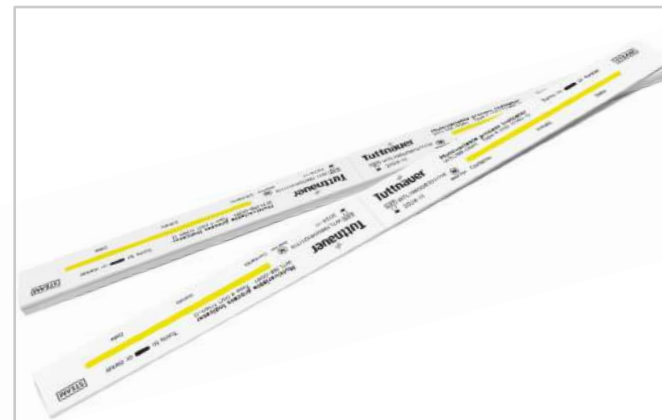


Guía de Referencia de Resultado:

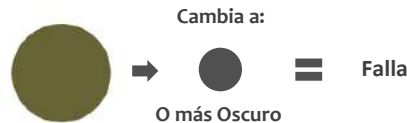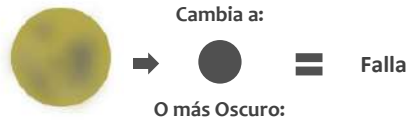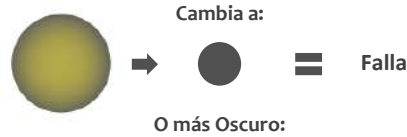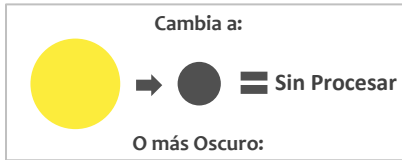

Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Estos resultados suelen ser obtenidos cuando la calidad de vapor es mala o no se ha generado un vacío adecuado.

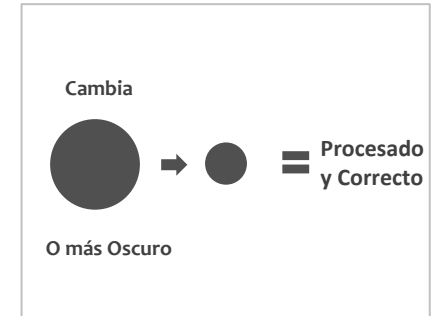

II. Indicadores Químicos

Integrador Químico para Proceso de Esterilización por Vapor

Vapor | Tipo 5 | WTL198-0068

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0068 Tipo 5
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	200 Unidades en Bolsa de Aluminio
COLOR INICIAL	Amarillo
COLOR FINAL	Negro
TAMAÑO	70 mm x 23 mm (Aproximado)
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0302



Guía de Referencia de Resultado:



Cambia a:



Falla

Falla

Falla

O más Oscuro

Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Las principales causas de avería son:

1. Duración inadecuada del ciclo.
2. Selección de ciclo Incorrecta.
3. Sobrecarga / Carga incorrecta de el esterilizador.
4. Mala calidad del vapor.
5. Mal funcionamiento del esterilizador.
6. Indicador de bloqueo con gran masa metálica.

Cambia a:



Procesado y Correcto


O más Oscuro

II. Indicadores Químicos



Indicador Multi-variable para Proceso de Esterilización por Vapor

Bowie & Dick | Tipo 2 | WTL198-0158

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0158 Tipo 2
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Bowie Dick Test Pack
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	20 Unidades por Paquete
COLOR INICIAL	Amarillo
COLOR FINAL	Marrón Oscuro o Negro (Color Homogeneo)
TAMAÑO	16 mm x 125 mm x 125 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Edgardo Rebagliati Martins
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0199

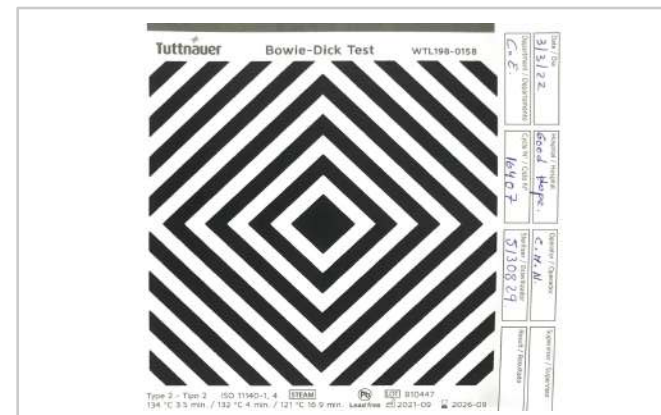

Guía de Referencia de Resultado:

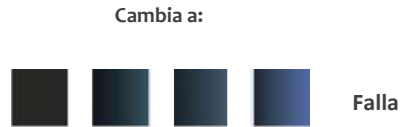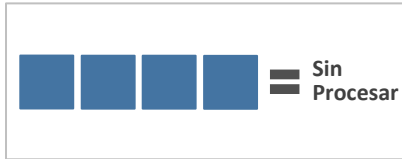


Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Las principales causas de avería son:

1. Remoción de aire y penetración de vapor insuficiente.
2. Temperatura alcanzada, sin remoción de aire ni penetración de vapor

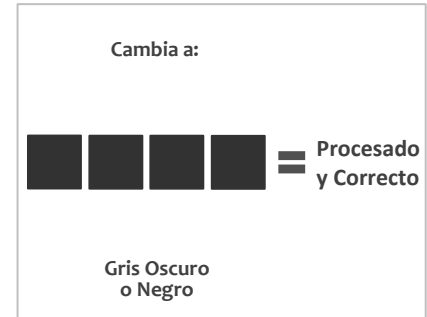

II. Indicadores Químico




Indicador para Monitoreo de Equipos Esterilización por Vapor

HELIX-PCD + Kit de Tiras Reactivas de Simulación Test Bowie & Dick | Tipo 2 | WTL198-0159

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0159 Tipo 2
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	HELIX-PCD + Tiras de Simulación Bowie Dick
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	HELIX-PCD: 250 Ciclos 25 hojas de 10 Und.
COLOR INICIAL	Azul
COLOR FINAL	Gris Oscuro o Negro
TAMAÑO	TIRA: 76 x 6 mm. HOJA: 80 x 98.5 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Arzobispo Loayza
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO



Guía de Referencia de Resultado:

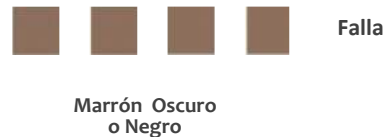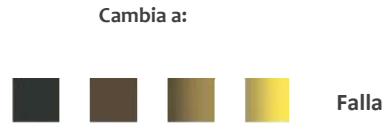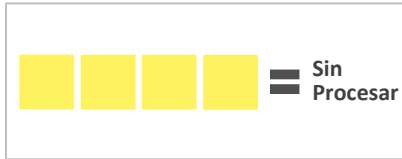


Falla:

No se lograron uno o más parámetros de esterilización. El material no puede considerarse estéril y debe procesarse de nuevo.

Las principales causas de avería son:

1. Remoción de aire y penetración de vapor insuficiente.
2. Temperatura alcanzada, sin remoción de aire ni penetración de vapor

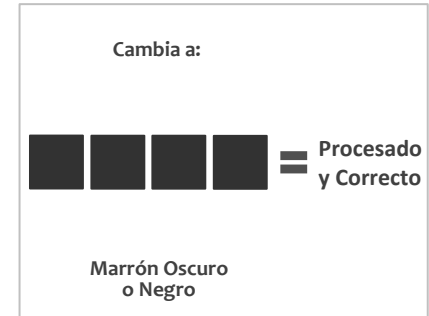

II. Indicadores Químicos

Indicador para Control de Ciclos de Esterilización por Vapor

HELIX-PCD + Kit de Tiras Reactivas de Indicador Químico 3.5 Minutos | Tipo 2 | WTL198-0160

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0160 Tipo 2
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	HELIX-PCD + Kit de Tiras Reactivas 3.5"
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	HELIX-PCD: 250 Ciclos 25 hojas de 10 Und.
COLOR INICIAL	Amarillo
COLOR FINAL	Marrón Oscuro o Negro
TAMAÑO	TIRA: 76 x 6 mm. HOJA: 80 x 98.5 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0233






INDICADORES BIOLÓGICOS

III. Indicadores Biológicos

Para Proceso de Esterilización con Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno

VH₂O₂ | 30 MINUTOS | WTL198-0067

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Biológicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0067
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Indicador Biológico VH2O2 30 Minutos
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	50 Unidades por Caja
TIRA DE INDICADOR QUÍMICO	Vira a verde
LECTURA FINAL	Por Fluorescencia
MEDIO DE CULTIVO	0.5 - 0.7 ML Color Púrpura
PORTADOR DE ESPORAS	≥ 10 ⁶ Esporas Geobacillus Stearothermophilus
TUBO DE POLIPROPILENO	50.4mm alto x 8.5 de diametro externo
AMPOLLA DE VIDRIO	35mm de altura y diámetro externo 6.8mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 - ISO 11138:2017
VIGENCIA DEL PRODUCTO	2 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	12 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Arzobispo Loayza
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0294

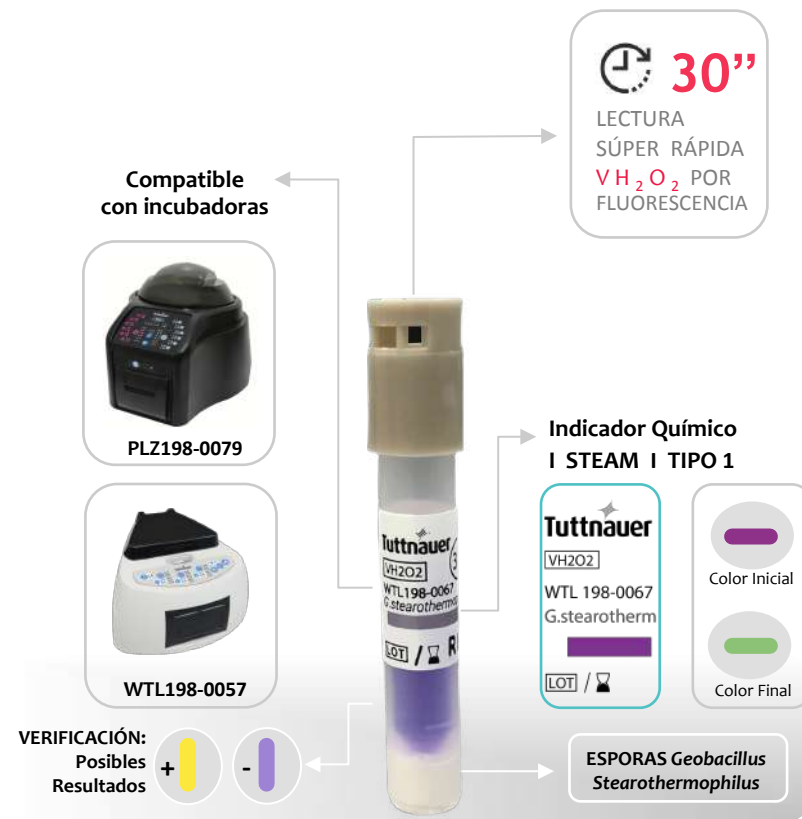

Compatible con incubadoras

PLZ198-0079

WTL198-0057

LECTURA SÚPER RÁPIDA VH₂O₂ POR FLUORESCENCIA 30''

Indicador Químico I STEAM I TIPO 1

Tuttnauer
VH2O2
WTL 198-0067
G.stearotherm

Color Inicial

Color Final

VERIFICACIÓN: Posibles Resultados + -

ESPORAS *Geobacillus Stearothermophilus*

III. Indicadores Biológicos

Para Proceso de Esterilización por Vapor

STEAM | 20 MINUTOS | WTL198-0072

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Tuttnauer
PAÍS DE ORIGEN	Israel
GRUPO	Indicadores Biológicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	WTL198-0072
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Indicador Biológico STEAM 20 Minutos
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	50 Unidades por Caja
TIRA DE INDICADOR QUÍMICO	Vira a marrón
LECTURA FINAL	Por Fluorescencia
MEDIO DE CULTIVO	0.5 - 0.7 ML Color Púrpura
PORTADOR DE ESPORAS	≥ 10 ⁶ Esporas Geobacillus Stearothermophilus
TUBO DE POLIPROPILENO	50.7mm alto x 8.5 de diametro externo
AMPOLLA DE VIDRIO	35mm de altura y diámetro externo 6.8mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 - ISO 11138:2017
VIGENCIA DEL PRODUCTO	2 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	12 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Edgardo Rebagliati Martins
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0087



Compatible con incubadoras

PLZ198-0079

WTL198-0057

20''
LECTURA ULTRA RÁPIDA
STEAM POR FLUORESCENCIA

Indicador Químico I STEAM I TIPO 1

Tuttnauer
STEAM
WTL 198-0072
G.stearotherm
LOT /

Color Inicial (Pink)

Color Final (Brown)

ESPORAS Geobacillus Stearothermophilus

VERIFICACIÓN: Posibles Resultados + -

EMPAQUE PARA ESTERILIZACIÓN




IV. Empaque para Esterilización

Para Procesos de Esterilización

SVCP 075 | PAPEL CREPADO | VAPOR | ÓXIDO DE ETILENO | RADIACIÓN GAMMA



DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Sterivic
PAÍS DE ORIGEN	China
GRUPO	Papel Crepado
CÓDIGO DE PRODUCTO	SVCP 030 SVCP 120
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor Óxido de Etileno Radiación Gamma
GRAMAJE	60/m2
INDICADOR QUÍMICO TIPO 1	Sello Reactivo Impreso en el Papel Crepado
CARACTERÍSTICAS	Pliego de Papel Crepado 100% Fibra de Celulosas
TAMAÑO	Desde 30cm hasta 120cm conforme a las EE.TT
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	EN 868-2 - ISO 11607
COLORES	Azul Verde Blanco
VIGENCIA DEL PRODUCTO	3 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Carlos Lanfranco La Hoz
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	4957 0096 0008

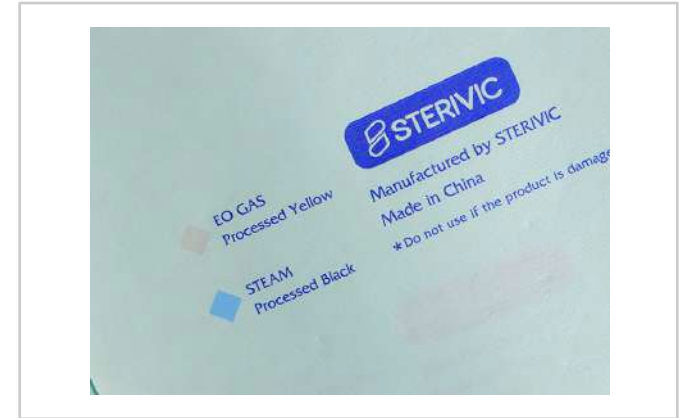

IV. Empaque para Esterilización

TELA NO TEJIDA | Para Procesos de Esterilización
VAPOR | ÓXIDO DE ETILENO | PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Sterivic
PAÍS DE ORIGEN	China
GRUPO	Tela no Tejida para Esterilización
CÓDIGO DE PRODUCTO	SVSM 075 SVSM 090 SVSM 120
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor OE Plasma de Peróxido de Hidrógeno
GRAMAJE	60G/m2
USO	Quirófano (Embalaje y Envoltorio)
CARACTERÍSTICAS	Protección Bacteriana Superior: (2 Capas)
TAMAÑO	75cm 90cm 120cm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	EN 868-2 - ISO 11607-1
COLORES	Azul Verde Morado Blanco
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	4957 0074 3063 - 3064 - 2228

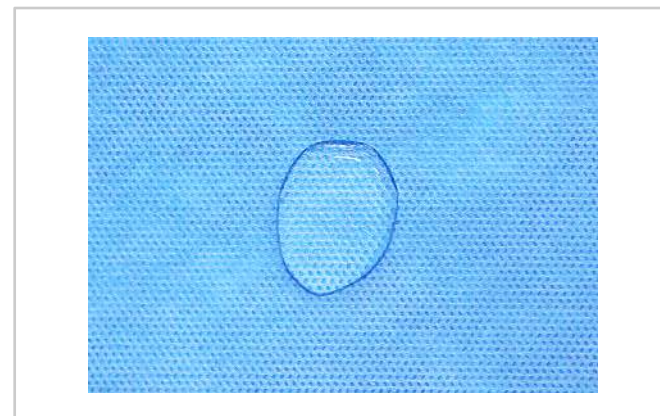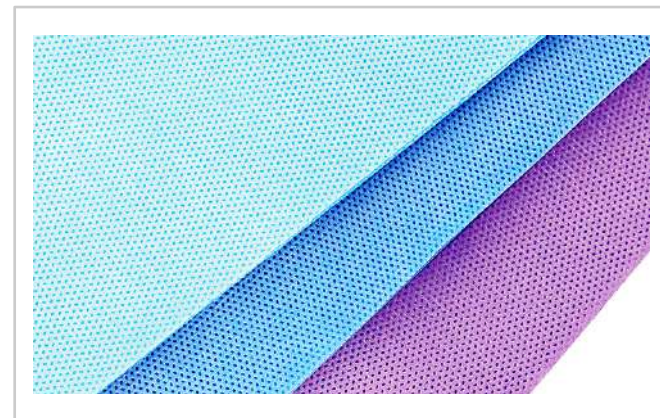

IV. Empaque para Esterilización

Para Procesos de Esterilización

SVFR 075 | MANGAS MIXTAS PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Sterivic
PAÍS DE ORIGEN	China
GRUPO	Mangas Mixtas para Esterilización Sin Fuelle
CÓDIGO DE PRODUCTO	SVFR 075 SVFR 400
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor - Óxido de Etileno - Formaldehído
CARACTERÍSTICAS	Papel Superior Francés STERIMED 70g/m2
COLOR INICIAL	Vapor: Azul OE: Rosa Form: Rojo
COLOR FINAL	Vapor: Negro OE: Amarillo Form: Verde
TAMAÑO	Rollo de 200 Metros
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 11140-1 - EN ISO 11607 - EN 868-3
SELLADO	De 180°C Hasta 200°C
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Dos de Mayo
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	4957 0134 0025



DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	Sterivic
PAÍS DE ORIGEN	China
GRUPO	Mangas Mixtas para Esterilización Con Fuelle
CÓDIGO DE PRODUCTO	SVGR 075 SVGR 400
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor - Óxido de Etileno
CARACTERÍSTICAS	Papel Superior Francés STERIMED 70g/m2
COLOR INICIAL	Vapor: Azul OE: Rosa
COLOR FINAL	Vapor: Negro OE: Amarillo
TAMAÑO	Rollo de 100 Metros
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 11607 - EN 868-5
SELLADO	De 180°C Hasta 200°C
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Carlos Lanfranco La Hoz
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	4957 0134 0103



EMPAQUE TIPO TYVEK CON INDICADOR DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	STERIVIC
PAÍS DE ORIGEN	China
GRUPO	Empaque Tipo Tyvek con Peróxido de Hidrogeno
CÓDIGO DE PRODUCTO	SVTR 075 SVTR 400
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Plasma - Peróxido de Hidrógeno
CARACTERÍSTICAS	Papel Dupont de Estándar 65Gr/m2
COLOR INICIAL	Azul
COLOR FINAL	Rosa Rojo
TAMAÑO	Rollo de 100 Metros
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	EN 868-5 - ISO 11607
SELLADO	De 120°C Hasta 135°C
VIGENCIA DEL PRODUCTO	5 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	4957 0074 2219





I. INDICADORES QUÍMICOS

Indicador Multi-variable para Proceso de Esterilización por Vapor

Plasma de Peróxido de Hidrógeno | Tipo 4 | SVISPL 16105

DISTRIBUIDOR	MDI Traders S.A.C.
MARCA	STERIVIC
PAÍS DE ORIGEN	China
GRUPO	Indicadores Químicos
CÓDIGO DE PRODUCTO	SVISPL 16105 Tipo 4
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	Plasma de Peróxido de Hidrógeno
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	250 Unidades en Caja
COLOR INICIAL	Verde
COLOR FINAL	Amarillo
TAMAÑO	105 mm x 16 mm
REQUIERE REGISTRO SANITARIO	SI () NO (X)
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 13485:2016 ISO 11140-1:2014
METALES PESADOS	100% Libre de Metales Pesados Tóxicos
VIGENCIA DEL PRODUCTO	2 Años desde la fecha de fabricación
GARANTÍA DE PRODUCTO	24 Meses desde el ingreso al almacén
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Hospital Nacional Arzobispo Loayza
RESULTADO DEL PROCESO	PROCESADO Y CORRECTO
CODIGO SIGA	5120 0006 0142





Calle: Eduardo Lizaraburo N° 250, San Borja, Lima - Perú

Cel.: +51 993 339 602 - Telf.: +51 1 437 3203 - E-mail: fcorrea@mditraders.com

www.mditraders.com